



Hillrom™



Le Service Hub de  
Welch Allyn®


## UN ACCÈS ET DES DONNÉES QUI VOUS DONNENT DU POUVOIR

Avec un flux de travail exclusif à votre organisation, le Service Hub vous permet de surveiller et de gérer vos appareils connectés, le tout à partir de votre propre ordinateur.

**Maximisez le temps utilisable pour protéger votre investissement et faire gagner du temps à votre personnel.**

- Gérez tous vos appareils Welch Allyn Connex, y compris les moniteurs de signes vitaux, les stations centrales et les serveurs
- Surveillez l'utilisation des capteurs, les cycles des batteries, les fichiers journaux, les microgiciels et les processus actifs
- Déployez les mises à jour des logiciels\* et les fichiers de configuration à distance
- Notre solution simple et sécuritaire n'utilise que les données de service; aucun renseignement sur la santé des patients n'est transféré.

### NUAGE DE DONNÉES DE SERVICE

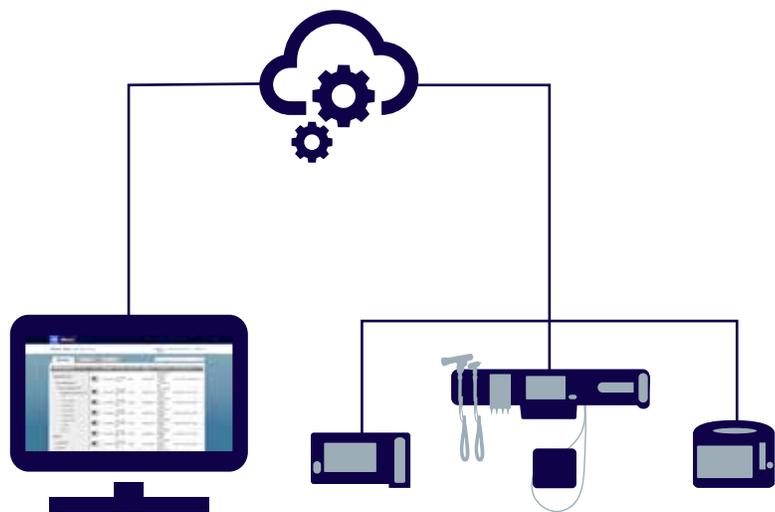

**SERVICE HUB DE WELCH ALLYN**

**MONITEURS DE SIGNES VITAUX WELCH ALLYN CONNEX®, STATIONS CENTRALES ET SERVEURS**

\*Moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex seulement

## SPÉCIFICATIONS DU SERVICE HUB DE WELCH ALLYN

SERVICE APPLICATIF	PROTOCOLE
PartnerConnect Agent	TCP
Service Monitor de Welch Allyn	TCP
Service Hub de Welch Allyn	TCP (HTTPS)
Types de fichiers de sortie	.log, .zip, .txt
Types de fichiers d'entrée	.tar.gz, .tar, .seq, .wsf, .pim, .xml, .txt, .pdf

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME POUR LE SERVICE HUB DE WELCH ALLYN

Système d'exploitation du serveur et du système	Windows® Server 2008; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019
Limites de rendement	500 appareils par serveur; peut être installé sur plusieurs serveurs Les appareils doivent être configurés pour NRS
Navigateurs pris en charge	Internet Explorer 11 et versions plus récentes; Google Chrome™ version 69 et versions plus récentes; Apple Safari® iOS 11 et versions plus récentes
Exigences pour l'ordinateur du serveur	Processeur 64 bits 1,4 GHz; 8 Go de RAM; 32 Go d'espace disque
Connexion réseau	Carte d'interface réseau de 1 Go ou plus recommandée

## APPAREILS CONNEX ET VERSIONS PRIS EN CHARGE

Moniteur Connex Spot	1.24 ou version plus récente
Moniteur de signes vitaux Connex série 6000	2.X ou version plus récente, sauf v2.40.x
Système mural intégré Connex	2.X ou version plus récente, sauf v2.40.x
ProBP™ 3400	1.0 ou version plus récente
Connex CS (serveur de la station centrale)	1.8x, 1.7x
Connex CS (client de la station centrale)	1.8x ou version plus récente
Connex CS (station centrale autonome)	1.8x ou version plus récente
Cerner VitalsLink	Cerner VitalsLink avec Network Connectivity Engine (NCE) NCE 5.0 ou version plus récente

Pour découvrir comment le Service Hub de Welch Allyn peut vous donner du pouvoir, à vous et à votre équipe, communiquez avec votre représentant de Hillrom ou composez le 1 800 267-2337 pour parler à un représentant du service à la clientèle.



[hillrom.com](https://www.hillrom.com)

Windows est une marque déposée de Microsoft.

Hillrom se réserve le droit d'apporter des changements à la conception, aux spécifications et aux modèles, sans préavis. La seule garantie offerte par Hillrom est la garantie écrite expresse fournie au moment de la vente ou de la location de ses produits.

© 2019 Welch Allyn, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. MC16434 80023890 Ver A 2020-05 FR - CA